



Přístroj pro venózní diagnostiku

Medis, Medizinische Messtechnik GmbH

Popis

VenoScreen plus slouží k provádění neinvazivní diagnostiky cév za využití světelné reflexní reografie. Pomocí této technologie lze zjišťovat venózní dysfunkci a určit její stádium. VenoScreen plus je ready-to-use zařízení s integrovanou tiskárnou a dotykovým displejem, který zobrazuje průběh vyšetření a naměřené výsledky.

Software

Diagnostická softwarová platforma, která je součástí dotykového PC, je dostupná také v českém jazyce a umožňuje zobrazení a ukládání naměřených dat.



Výsledné měření

Určení

VenoScreen plus slouží k zhodnocení cévní dysfunkce, převážně k detekci chronické žilní nedostatečnosti (chronic venous insufficiency - CVI), za pomoci světelné reflexní reografie (LRR/D-PPG).

Výhody

- ready-to-use zařízení
- neinvazivní technologie
- rychlé stanovení diagnózy
- mobilní zařízení



Cvičení pro vypumpování krve

Všechny produkty společnosti Medis, Medizinische Messtechnik GmbH jsou vyrobeny tak, aby splňovaly mezinárodní standardy a směrnice, které jsou vyžadovány.



Návrat krve

Technická data

rozměry (v x š x h)
hmotnost
princip měření
měřicí kanály
napájení
bezpečnost

90 mm x 210 mm x 230 mm
1,5 kg
světelná reflexní reografie (LRR / D-PPG)
2 x LRR / D-PPG
100–240 VAC, 50/60 Hz, max. 1.4–0.7 A
třída IIa

Certifikáty, normy

IEC / EN 601-1 (třída I, typ BF)
IEC / EN 601-1-2

CE 0197

Typy produktů

VenoScreen plus

Objednací kód

MS V6000

Volitelné příslušenství (není součástí balení)


lepící pásky (100 ks/balení)

Objednací kód

MS R3202

lepící pásky (500 ks/balení)

MS R3203

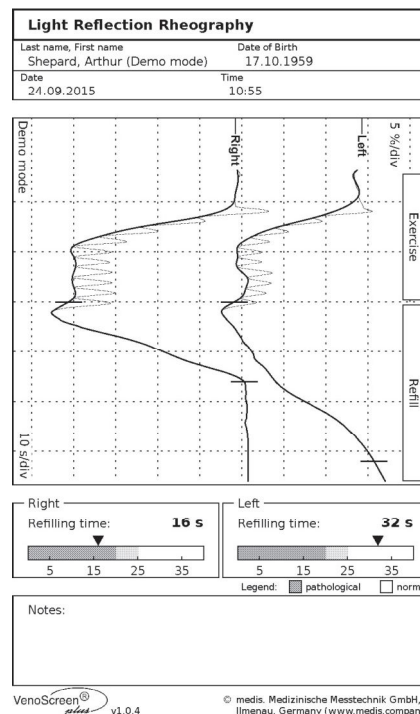

Protokol měření



VenoScreen plus



VenoScreen plus kompletní balení

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367



www.mr-diagnostic.cz